

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ
ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
XXI**

Москва — 1986

Сборник методических указаний составлен методической секцией по промышленно-санитарной химии при Проблемной комиссии "Научные основы гигиены труда и профессиональной патологии".

Настоящие методические указания распространяются на измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны при санитарном контроле.

Редакционная коллегия: В.П.Якимова, Е.В.Некорошева,
Р.Н.Македонская, Г.А.Дьякова,
В.Г.Овечкин

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации алюминия оксида в воздухе	9
2. Методические указания по измерению концентраций изомеров аминофенилуксусной кислоты в воздухе методом потенциометрического титрования	15
3. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации арсенипирита в воздухе	19
4. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации бария фосфорнокислого двузамещенного в воздухе	25
5. Методические указания по хроматографическому измерению концентрации бензотриазола в воздухе	29
с применением газожидкостной хроматографии	29
с применением тонкослойной хроматографии	35
6. Методические указания по нонметрическому измерению концентраций борной кислоты и борного ангидрида в воздухе .	40
7. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации γ -бутиролактона в воздухе	47
8. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации глутарового альдегида в воздухе	51
9. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций диаллилфталата и диаллилизофталата в воздухе	56
10. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации дибутилдипилната в воздухе	61
II. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации диметилвинилкарбинола (3-метил-1-бутен-	

-3-ола) в воздухе	66
12. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации диметилсульфата в воздухе	71
13. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций диметилфенолов в воздухе	75
14. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций димеров аллена (1,3-диметиленциклобутана и 1,2-диметиленциклобутана) в воздухе	80
15. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентрации 2,4-динитроанилина в воздухе	84
16. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций замазливателей "СИНТОКС-12" и "СИНТОКС-20М" в воздухе	88
17. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации замазливателя "ТЕПРЭМ-6" в воздухе	93
18. Методические указания по хроматографическому измерению концентрации ленацила в воздухе	97
19. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации лимнинофора К-77 в воздухе	103
20. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации мезитилена в воздухе	108
21. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 0-1-ментила, 0-1,4-ментандена и 0-цимола в воздухе	113
22. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций метилацетилен-алазновой фракции в воздухе	119

23. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций меркаптанов в воздухе 123
24. Методические указания по измерению концентрации натрия сульфата в воздухе методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии 134
25. Методические указания по полярографическому измерению концентрации пара-нитробензойной кислоты в воздухе . . 139
26. Методические указания по хроматографическому измерению концентрации оксамата в воздухе 144
27. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 4-оксо-2,2,6,6-тетраметилпиперидина и 4-амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидина в воздухе 161
28. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации пенообразователей ПНК-30 и КЧНР в воздухе . 156
29. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации полиаэзола в воздухе 163
30. Методические указания по измерению концентрации свинца в воздухе методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии 168
31. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации сероуглерода в воздухе 172
32. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации сольвент-нафта в воздухе 177
33. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций летучих компонентов, выделяющихся из смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) "КАРБМОЛ С1" и "КАРБМОЛ Э1" (метанола, ацетона, этанола, н-бутанола, втор-

- бутанола, гексана) 181
34. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций летучих компонентов, выделяющихся из СОЖ "ЭМБОЛ" и "ОСМ-4" (н-пентана, 2- и 3-метилгексана, 3-метилпентана, н-гексана, н-гептана; 1,1,2-трихлорэтана) 188
35. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации сульфолана в воздухе 196
36. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций изомеров тетрахлорбутана в воздухе 201
37. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации тетрафторэтилфенилового эфира "ФЕНТАЛЕНА-14) в воздухе 207
38. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации 1-тетрафторэтокса- 2,4-динитробензола в воздухе 211
39. Методические указания по хроматографическому измерению концентрации тиазона в воздухе 215
40. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентрации тиоациланилида в воздухе 220
41. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 1,4-бис (трихлорметил) бензола (гексахлорпараксилола) и 1,3-бис (трихлорметил) бензола (гексахлорметаксилола) в воздухе 224
42. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации 1,1,1-трихлорэтана (метилхлороформа) в воздухе 229
43. Методические указания по фотометрическому измере-

нию концентраций удобрений сульфо-аммиачного и аммиачно-карбамидного в воздухе	233
44. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций п-фенилен-бис-5(6)-аминобензимидазоляла (М-8) в воздухе	238
45. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации фенилизотианата в воздухе	243
46. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций фенола и анилина в воздухе	248
47. Методические указания по хроматографическому измерению концентрации фитона (картофля) в воздухе	253
48. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентрации фталоцианина меди в воздухе	258
49. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций фталофоса и хлорметифталимида в воздухе	262
50. Методические указания по ионометрическому измерению концентраций солей фтористоводородной кислоты в воздухе	269
51. Методические указания по измерению концентрации п-хлорфенола в воздухе	
с применением газожидкостной хроматографии	276
фотометрическим методом	277
52. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций цефалоспориновых антибиотиков (цефалексина и цефалотина) в воздухе	283

53. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций цианистого водорода и акрилонитрила в воздухе.	288
54. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций четыреххлористого углерода, тетрахлорэтилена (перхлорэтилен) и тетрахлорэтана в воздухе. . .	298
55. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 2-этил-2-гексенала, 2-этилгексенала и бутилбутирата в воздухе.	304
56. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации 2-этилгексилакрилата в воздухе. . .	312
57. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций этиленгликоля и метанола в воздухе .31'	
58. Методические указания по ионометрическому измерению концентраций фтористого водорода в воздухе.	322
Приложение I. Приведение объема исследуемого воздуха к температуре 20°C и давлению 760 мм рт.ст.	331
Приложение 2. Таблица коэффициентов для различных температур и давления.	332
Приложение 3. Список институтов, представивших методические указания.	333
Указатель определяемых веществ.	338
Приложение 4. Вещества, определяемые по ранее утвержденным и опубликованным Методическим указаниям.	340

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главного
государственного
санитарного врача СССР

А.И. Заиченко
А.И. ЗАИЧЕНКО

" 5 " *сентября* 1985 г.

№ 3997-85

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ
2-ЭТИЛ-2-ГЕКСЕНАЛЯ, 2-ЭТИЛГЕКСЕНАЛЯ И БУТИЛБУТИРАТА
В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ^{x)}

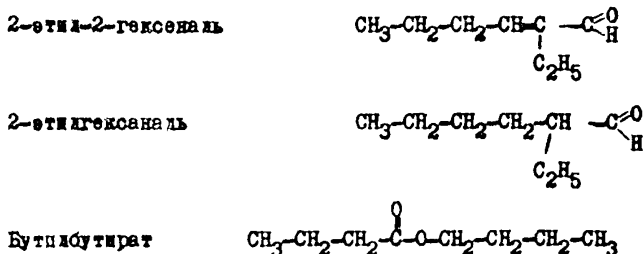


Таблица 41

Физико-химические свойства определяемых веществ

Наименование показателей	2-этил- -2 гек- сеналь	2-этил- гекса- наль	Бутил- бути- рат
1	2	3	4
Молекулярная масса	126	128	144
Агрегатное состояние	Жидкость		
Цвет	Бесцветный		

^{x)} Метод апробирован в производстве 2-этилгексанола.

Продолжение таблицы 4I

I	2	3	4
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,848	0,820	0,872
Температура кипения, °С	175,5	163,0	166,4
Растворимость в воде при 20 °С, мас. %	0,07	0,07	0,05
Растворимость в спирте, эфире, хлороформе, ацетоне	Неограниченная		

В воздухе находятся в виде паров.

I. Характеристика метода

Определение основано на использовании газожидкостной хроматографии на приборе с пламенно-ионизационным детектором.

Отбор проб проводится без концентрирования, при необходимости хранения пробы более 20 часов - с концентрированием на силикагель.

Предел измерения этилгексеналя - 0,008 мкг, этилгексеналя и бутилбутирата - 0,05 мкг в анализируемом объеме раствора.

Предел измерения в воздухе этилгексеналя - 1,5 мг/м³, этилгексеналя и бутилбутирата - 10 мг/м³ (при отборе в воздухе).

Диапазон измеряемых концентраций в воздухе этилгексеналя от 1,5 до 30 мг/м³, этилгексеналя и бутилбутирата от 10 до 200 мг/м³.

Определению не мешают изомаляновый и н-малый альдегиды, изобутиловый и н-бутиловый спирты, изобутилоформат, бутилоформат, толуол, изобутилэтилобутират, бутилэтилобутират, изобутилбутират.

Граница суммарной погрешности измерения не превышает ±20%.

Предельно допустимые концентрации этилгексеналя в воздухе - 3 мг/м³, бутилбутирата - 20 мг/м³, ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) этилгексеналя - 20 мг/м³.

2. Реактивы, растворы и материалы

2-этил-2-гексеналя, свежеперегнанный, с содержанием основного вещества не менее 95,0%.

2-этилгексеналя, свежеперегнанный, с содержанием основного вещества не менее 95,0%.

Бутилбутират с содержанием основного вещества не менее 95,0%.

Хлороформ, ТУ-6-09-4263-76, хч.

Полифениловый эфир 5Ф 43 (ПФЭ) для хроматографии, ТУ 6-09-419-70.

Хроматон-Н фирмы "Lachema", фр.0,20-0,16 мм.

Спирт этиловый ректификованный технический, ГОСТ 18300-72, хч, концентрированный и 25%-ный раствор.

Кислота соляная, ГОСТ 3118-77, хч, 10%-ный раствор.

Газообразные азот, ГОСТ 9293-74; воздух, ГОСТ 11882-73; водород технический, ГОСТ 3022-70, в баллонах с редукторами.

Силикагель АСК, ГОСТ 3956-76, фр.0,50-0,25 мм.

Основной стандартный раствор 2-этил-2-гексеналя. Во взвешенную мерную колбу вместимостью 25 мл, содержащую 7-12 мл этилового спирта, вносят 3-4 капли вещества. Колбу повторно взвешивают, доводят объем раствора до метки этанолом, перемешивают и рассчитывают концентрацию 2-этил-2-гексеналя в мг/мл. Раствор устойчив в течение 10 дней.

Стандартные растворы 2-этил-2-гексеналя № 1-6 с концентрацией 4, 8, 20, 40, 60 и 80 мкг/мл готовят путем соответст-

вещного разбавления основного стандартного раствора 25%-ным раствором этилового спирта в мерных колбах вместимостью 100 мл. Растворы устойчивы в течение 7 дней.

Основные стандартные растворы 2-этилгексеналя и бутилбутирата готовят аналогично раствору 2-этил-2-гексеналя.

Стандартные растворы 2-этилгексеналя и бутилбутирата № I-6 с концентрацией 25, 50, 100, 120, 140 и 160 мкг/мл готовят соответствующим разбавлением основных растворов 25%-ным раствором этилового спирта в мерных колбах вместимостью 100 мл. Растворы устойчивы в течение 7 дней.

3. Приборы и посуда

Хроматограф с пламенно-ионизационным детектором.

Колонка из нержавеющей стали длиной 5 м и внутренним диаметром 3 мм.

Шприц медицинский, ТУ 6-I-378-73, вместимостью 5 мл.

Микрошприц МШ-10, ГОСТ 8043-74.

Пипетки газовые, ГОСТ 18954-73.

Муфельная печь.

Аспирационное устройство.

Секундомер, ГОСТ 5072-79.

Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 25 и 100 мл.

Пробирки градуированные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 5 мл.

Пипетки, ГОСТ 20292-74.

Водяная баня.

Чашка фарфоровая, ГОСТ 9147-73.

Трубки концентрационные длиной 120 мм, диаметром 7 мм с перфорированной пластинкой или металлической сеткой для удерживания слоя сорбента.

4. Проведение измерения

Условия отбора проб воздуха

Воздух со скоростью 0,5 л/мин в течение 5 мин аспирируют через газовую пипетку или 15 мин через концентрационную трубку, заполненную 2 мл силикагеля. После отбора пробы газовую пипетку или концентрационную трубку закрывают стеклянными заглушками.

Для определения концентрации веществ на уровне 0,5 ЦДК достаточно отобрать 5 мл воздуха. При отборе проб на силикагель следует отобрать не менее 8 л воздуха.

Срок хранения проб в газовых пипетках не более 20 часов, в концентрационных трубках — не более двух суток.

Условия анализа

Приготовление сорбента. Силикагель обрабатывают концентрированной соляной кислотой, нагретой до 50–60 °С, и далее — 10%-ным раствором соляной кислоты до получения бесцветного раствора. Затем силикагель тщательно промывают водой до удаления хлор-ионов, сушат в сушильном шкафу и прокалывают в муфеле при температуре 500 °С в течение 3–4 часов. Хранят силикагель в банке с притертой крышкой в эксикаторе.

Приготовление насадки для хроматографической колонки. Навеску полифенилового эфира 5049 из расчета 10% от массы хроматона-М растворяют в хлороформе и приготовленным раствором заливают навеску хроматона, помещенную в фарфоровую чашку; смесь перемешивают, выдерживают 10–15 мин при комнатной температуре, а затем растворитель выпаривают на водяной бане в вытяжном шкафу. Подготовленной насадкой заполняют сухую чистую хроматографическую колонку. Колонку помещают в термостат хроматографа и, не присоединяя к детектору, кондиционируют в токе газа-носителя.

ля в течение 15 часов: по 2 часа при температурах 60, 80, 120, 150, 200 °С и 5 часов - при 250 °С.

В хроматограф вводят 5 мл пробы, отобранной в газовую липетку. При концентрации вещества свыше 60 мг/м³ анализируют 1 мл воздуха.

При отборе пробы на силикагель анализ производят следующим образом. Через концентрационную трубку пропускают 6 мл 25%-ного раствора этилового спирта порциями по 0,2-0,3 мл и отбирают в градуированную пробирку первые 3 мл элюата. Элюат можно хранить не более одного дня. В хроматограф вводят 2 мкл элюата.

Условия хроматографирования

Температура колонки, °С	110
Температура испарителя, °С	200
Скорость подачи газов, мл/мин	
азота (газа - носителя)	25
воздуха	300
водорода	40
Скорость движения диаграммной ленты, мм/час	240
Предел измерения усилителя УИТ-0,5 А	
Этилгексеналь	$20 \cdot 10^{-12}$
Этилгексеналь, бутилбутират	$100 \cdot 10^{-12}$
Объем вводимой пробы:	
градуировочные растворы, элюаты, мкл	2
газовые пробы при концентрации	
вещества 60 мг/м ³ , мл	5
при концентрации свыше 60 мг/м ³ , мл	1

Количественное определение 2-этилгексенала, 2-этилгексенала и бутилбутирата производят методом абсолютной калибровки.

Таблица 42

Время удерживания этилгексеналя, бутилбутирата,
этилгексеналя и сопутствующих веществ в воздухе
рабочей зоны

Вещество	Время удерживания	
	абсолютное, мин	относительное
Изомасляный альдегид	2,5	0,11
Масляный альдегид	2,7	0,12
Изобутанол	2,9	0,13
Бутанол	4,0	0,18
Изобутилформиат	~4	-
Бутилформиат	4,3	0,20
Толуол	5,6	0,26
Изобутилизобутират	8,3	0,38
Бутилизобутират	11,0	0,50
Изобутилбутират	11,6	0,53
2-этилгексеналя	13,8	0,63
Бутилбутират	15,8	0,72
2-этил-2-гексеналя	21,9	1,00

Для этого в хроматограф вводят по 2 мкл стандартных растворов, что соответствует содержанию 2-этилгексеналя от 0,008 до 0,0140 мкг, 2-этилгексеналя и бутилбутирата от 0,050 до 0,340 мкг.

Проводят не менее 3-х параллельных определений.

Строят градуировочные графики зависимости высоты пика определяемого компонента от содержания его в анализируемой пробе

градуировочного раствора или вычисляют градуировочные коэффициенты (β) по формуле:

$$\beta = \frac{x_i \cdot Y_i}{n} \text{ мкг/мм},$$

где x_i - массовое содержание определяемого компонента в анализируемой пробе градуировочного раствора, мкг;

Y_i - высота пика на хроматограмме, мм;

n - число определений.

Концентрацию определяемых компонентов в воздухе (C) вычисляют по формулам:

при анализе воздуха без концентрирования:

$$C = \frac{\beta \cdot h}{Y_{20}} \text{ мкг/м}^3,$$

при анализе воздуха с концентрированием на силикагель:

$$C = \frac{\beta \cdot h \cdot 3}{0,002 \cdot Y_{20}} \text{ мкг/м}^3,$$

где β - градуировочный коэффициент, мкг/мм;

h - высота пика анализируемого компонента, мм;

3 - общий объем элюата, мл;

0,002 - объем вводимого в хроматограф раствора, мл;

Y_{20} - объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный к температуре 20 °С и давлению 760 мм рт.ст. по формуле (приложение I), л.

Приложение I

Приведение объема воздуха к температуре 20 °С и давлению 760 мм рт.ст. проводят по следующей формуле:

$$V_{20} = \frac{V_t(273 + 20) \cdot P}{(273 + t^\circ) \cdot 101,33} ;$$

где V_t - объем воздуха, отобранный для анализа, л;

P - барометрическое давление, кПа (101,33 кПа = 760 мм рт.ст.);

t° - температура воздуха в месте отбора пробы, °С.

Для удобства расчета V_{20} следует пользоваться таблицей коэффициентов (приложение 2). Для приведения объема воздуха к температуре 20 °С и давлению 760 мм рт.ст. надо умножить V_t на соответствующий коэффициент.

Коэффициент К для приведения объема воздуха к стандартным условиям

°C	Давление P, кПа/мм рт.ст.									
	97,33/730	97,86/734	98,4/738	98,93/742	99,46/746	100/750	100,53/ 754	101,06/ 758	101,33/ 760	101,86/ 764
-30	1,1582	1,1646	1,1709	1,1772	1,1836	1,1899	1,1963	1,2026	1,2058	1,2122
-26	1,1393	1,1456	1,1519	1,1581	1,1644	1,1705	1,1768	1,1831	1,1862	1,1925
-22	1,1212	1,1274	1,1336	1,1396	1,1458	1,1519	1,1581	1,1643	1,1673	1,1735
-18	1,1036	1,1097	1,1158	1,1218	1,1278	1,1338	1,1399	1,1400	1,1490	1,1551
-14	1,0866	1,0926	1,0986	1,1045	1,1105	1,1164	1,1224	1,1284	1,1313	1,1373
-10	1,0701	1,0760	1,0819	1,0877	1,0936	1,0994	1,1053	1,1112	1,1141	1,1200
-6	1,0540	1,0599	1,0657	1,0714	1,0772	1,0829	1,0887	1,0945	1,0974	1,1032
-2	1,0385	1,0442	1,0499	1,0556	1,0613	1,0669	1,0726	1,0784	1,0812	1,0869
0	1,0309	1,0366	1,0423	1,0477	1,0535	1,0591	1,0648	1,0705	1,0733	1,0789
+2	1,0234	1,0291	1,0347	1,0402	1,0459	1,0514	1,0571	1,0627	1,0655	1,0712
+6	1,0087	1,0143	1,0198	1,0253	1,0309	1,0363	1,0419	1,0475	1,0502	1,0557
+10	0,9944	0,9999	1,0054	1,0108	1,0162	1,0216	1,0272	1,0326	1,0353	1,0407
+14	0,9806	0,9860	0,9914	0,9967	1,0027	1,0074	1,0128	1,0183	1,0209	1,0263
+18	0,9671	0,9725	0,9778	0,9880	0,9884	0,9936	0,9989	1,0043	1,0069	1,0122
+20	0,9605	0,9658	0,9711	0,9783	0,9816	0,9868	0,9921	0,9974	1,0000	1,0053
+22	0,9539	0,9592	0,9645	0,9696	0,9749	0,9800	0,9853	0,9906	0,9932	0,9985
+24	0,9475	0,9527	0,9579	0,9631	0,9683	0,9735	0,9787	0,9839	0,9865	0,9917
+26	0,9412	0,9464	0,9516	0,9566	0,9618	0,9669	0,9721	0,9773	0,9799	0,9851
+28	0,9349	0,9401	0,9453	0,9503	0,9555	0,9605	0,9657	0,9708	0,9734	0,9785
+30	0,9288	0,9339	0,9391	0,9440	0,9432	0,9542	0,9594	0,9645	0,9670	0,9723
+34	0,9167	0,9218	0,9268	0,9318	0,9368	0,9418	0,9468	0,9519	0,9544	0,9595
+38	0,9049	0,9099	0,9149	0,9198	0,9248	0,9297	0,9347	0,9397	0,9421	0,9471

Приложение 3

**Перечень институтов,
предоставляющих методические указания по измерению
концентраций вредных веществ в воздухе**

№/п	Методические указания	Учреждение, представившее методические указания
1	2	3
1.	Фотометрическое определение алюминия оксида	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г. Ленинград
2.	Потенциометрическое определение аминифенилуксусной кислоты	ВНИИ прикладной биохимии, г. Рига
3.	Фотометрическое определение арсенопириата	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г. Свердловск
4.	Фотометрическое определение бария фосфорнокислого двузамещенного	ВНИИ люминофоров, г. Ставрополь
5.	Определение бензотриазола газохроматографическое хроматографическое	Киевский филиал ГосНИИХЛОПРОЕКТ, г. Киев
6.	Монометрическое определение борной кислоты и борного ангидрида	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г. Киев
7.	Фотометрическое определение γ-бутиролактона	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г. Ленинград
8.	Фотометрическое определение глутарового альдегида	НИИ мономеров, г. Тула
9.	Газохроматографическое определение диаллилфталата и диаллилдиэфилаата	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г. Москва
10.	Газохроматографическое определение дибутиладипината	ВНИИ гербицидов и регуляторов роста растений, г. Уфа
11.	Газохроматографическое определение диметилвинилкарбинола	ВНИИ МЕТЕХИМ, г. Ленинград

1	2	3
12.	Газохроматографическое определение диметилсульфата	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва
13.	Фотометрическое определение диметилфенолов	НИИВЭТЕХИМ, г.Уфа
14.	Газохроматографическое определение димеров аллена	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва
15.	Спектрофотометрическое определение 2,4-динитроанилина	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Харьков
16.	Фотометрическое определение замасливателей "СИНТОКС-12" и "СИНТОКС-20М"	ВНИИ синтетических волокон, г.Калинин
17.	Фотометрическое определение замасливателя "ТЕПРЭМ-6"	ВНИИ синтетических волокон, г.Калинин
18.	Хроматографическое определение ленацида	ВНИТИ гербицидов и регуляторов роста растений, г.Уфа
19.	Фотометрическое определение люминофора К-77	ВНИИ люминофоров, г.Ставрополь
20.	Газохроматографическое определение мезитилена	НИИВЭТЕХИМ, г.Уфа
21.	Газохроматографическое определение 0-1-ментена, 0-1,4-ментадиена, 0-цимола	Белорусский НИ санитарно-гигиенический институт, г.Минск
22.	Газохроматографическое определение метилацетилен-алленовой фракции	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва
23.	Фотометрическое определение меркаптанов метод А метод Б	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Ангарск, г.Ленинград
24.	Определение натрия сульфата методом атомно-абсорбционной спектроскопии	Медицинский институт, г.Ростов-на-Дону
25.	Полярграфическое определение п-нитробензойной кислоты	Медицинский институт, г.Ростов-на-Дону

1	2	3
26.	Газохроматографическое определение оксамата	ВНИИХСЭР, г.Москва
27.	Фотометрическое определение 4-оксо-2,2,6,6-тетраметилпиперидина и 4-амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидина	Медицинский институт, г.Караганда
28.	Фотометрическое определение пенообразователей ППК-30 и КЧНР	Медицинский институт, г.Караганда
29.	Фотометрическое определение помидавола	Медицинский институт, г.Львов
30.	Среднее свинца методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии	Медицинский институт, г.Рига
31.	Газохроматографическое определение сероуглерода	ВЦНИОТ ВЦСПС, г.Москва
32.	Газохроматографическое определение солявента-нафт 1	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва
33.	Газохроматографическое определение летучих компонентов, выделяющихся из СОЖ "Карбамол СИ" и "Карбамол ЭИ"	--
34.	Газохроматографическое определение летучих компонентов, выделяющихся из СОЖ "Эмбол" и "ОСМ-4"	--
35.	Газохроматографическое определение сульфидана	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Уфа
36.	Газохроматографическое определение тетрагидробутана изомеров	Армянский НИИ общей гигиены и профзаболеваний, г.Ереван
37.	Газохроматографическое определение тетрафторэтилфенилового эфира (Фенталена-14)	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва
38.	Газохроматографическое определение I-тетрафторэтокси-2,4-динитробензола	--
39.	Хроматографическое определение тиазона	Грузинский НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Тбилиси

1	2	3
40.	Спектрофотометрическое определение тиацетиланилида	Медицинский институт, г.Караганда
41.	Газохроматографическое определение 1,4- и 1,3-бис(трихлорметил) бензола	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва
42.	Газохроматографическое определение 1,1,1-трихлорэтана (метилхлороформа)	ВНИИОТ ВЦСПС, г.Ленинград
43.	Фотометрическое определение удобрений сульф-аммиачного и аммиачно-карбамидного	Узбекский НИИ гигиены, санитарии и профзаболеваний, г.Ташкент
44.	Фотометрическое определение п-фенилен-бис-5(6)-аминобензимидазолида	Медицинский институт, г.Ростов-на-Дону
45.	Фотометрическое определение фенилдицианата	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Донецк
46.	Газохроматографическое определение фенола и анилина	ВНИИОТ ВЦСПС, г.Ленинград
47.	Хроматографическое определение фитона	ВНИИХСЗР, г.Москва
48.	Спектрофотометрическое определение фталоцианина меди	НИИ органических полу-продуктов и красителей, г.Москва
49.	Газохроматографическое определение фталофоса и хлорметилфтальмида	ВНИИХСЗР, г.Москва
50.	Ионометрическое определение солей фтористоводородной кислоты	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Ленинград ВНИИ ОТ ВЦСПС, г.Ленинград
51.	Определение п-хлорфенола газохроматографическое фотометрическое	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва ВНИИГИНТОКС, г.Киев, НИИХИМОТОПРОЕКТ, г.Москва

1	2	3
52.	Спектрофотометрическое определение цефалоспориновых антибиотиков	ВНИИ антибиотиков, г. Москва
53.	Фотометрическое определение цианистого водорода и акрилонитрила	ВНИИОТ ВЦСПС, г. Ленинград
54.	Газохроматографическое определение четыреххлористого углерода, тетрахлорэтана (перхлорэтана) и тетрахлорэтана	ВНИИОТ ВЦСПС, г. Москва
55.	Газохроматографическое определение 2-этил-2-гексоеналя, 2-этилгексаналя и бутилбутирата	ВНИИНХТЕХИМ, г. Ленинград
56.	Газохроматографическое определение 2-этилгексилкрилмера	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г. Горький
57.	Газохроматографическое определение этиленгликоля и метанола	Белорусский НИ санитарно-гигиенический институт, г. Минск
58.	Ионометрическое определение фтористого водорода	НИИУФ НПО "Минудобрения" и ВНИИОТ ВЦСПС, г. Москва; ВНИИОТ ВЦСПС, г. Ленинград

Указатель определяемых веществ

- Акрилонитрил 288
 Алюминия оксид 9
 4-амино-2,2,6,6-тетраметил-
 пиперидин 151
 Аминофенилуксусная кислота 15
 Анилин 248
 Аронопирит 19
 Ацетон см.СОЖ "Карбамол С1"
 Барий фосфорнокислый двува-
 щенный 25
 Бензотриазол 29
 Борная кислота 40
 Борный ангидрид 40
 Бутанол см.СОЖ "Карбамол"
 Бутилбутират 304
 Г-Бутиролактон 47
 Гексан см.СОЖ "Карбамол"
 Гексохлор-м(п)-ксилол 224
 Гексикур см.Ленация
 Гептан см.СОЖ "ОСМ-4"
 Глутаровый альдегид 51
 Дазомет см.Тиазон
 Диаллилизофталат 56
 Диаллилфталат 56
 Дибутилдипионат 61
 Диметилвинилкарбинол 66
 1,2-Диметиленциклобутан
 см.Димеры аллена
 Диметилсульфат 71
 Диметилфенол 75
 Димеры аллена 80
 2,4-Динитроанилин 84
 Замаоливатели
 Синтокс-12 88
 Тепрем-6 93
 Иттрия окись 103
 Картоцид см.Фитон
 Ленация 97
 Лимнифор К-77 103
 Мезитилен 108
 О-1,4-Ментадиен 113
 О-1-Ментен 113
 Метанол 317, 181
 Метилацетилен 119
 Метилацетилен-алленовая
 фракция 119
 3-Метилгексан см.СОЖ"ОСМ-4"
 3-Метилпентан см.СОЖ"Эмбол"
 Меркаптаны 123
 Метилхлороформ см.1,1,1-
 Трихлорэтан
 Натрия сульфат 134

- п-Нитробензойная кислота 139
 Оксамат 144
 4-Оксо-2,2,6,6-тетраметил-
 пиперидин 151
 Пенообразователи 156
 Пентан см.СОЖ ОСМ-4
 Перхлорэтилен 298
 Полидазол 163
 Свинец 168
 Сероуглерод 172
 Сольвент-нафта 177
 СОЖ, определение приоритетных
 компонентов при использовании
 СОЖ "Карбамол СИ, ЗI" 181
 СОЖ "Эмбол", "ОСМ-4" 188
 Сульфолан 196
 Тетрафторэтилфениловый
 эфир 207
 Тетрафторэтоксид-2,4-динитро-
 бензол 211
 Тетрахлорбутана изомеры 201
 Тетрахлоретан 298
 Тетрахлорэтилен 298
 Тиазол 215
 Тисоцианилид 220
 1,4(1,3)-бис(трихлорметил)
 бензол 224
 1,1,1-Трихлоретан 229
 1,1,2-Трихлоретан см.СОЖ
 "Эмбол"
 Углерод четыреххлористый 298
 Удобрения сульфо-аммиачное и
 аммиачно-карбамидное 233
 п-Фенилен-дио-5(6)-аминобенз-
 имидазола (М-8) 238
 п-Фенилизоцианат 243
 Фенол 248
 Фенталан-14 207
 Фитон 253
 Фталоцианин меди 258
 Фталофос 262
 Фтористоводородной кислоты
 соли 269 ;фтористый водород 322
 Хлорметилафталимид 262
 п-Хлорфенол 276
 Цефалоспориновые антибиотики
 (цефалексин, цефалотин) 283
 Цианотый водород 288
 о-Цимол 113
 Этанол см.СОЖ "Карбамол СИ"
 2-Этилгексанааль 304
 2-Этил-2-гексенааль 304
 2-Этилгексилакрилат 312
 Этиленгликоль 317

Приложение 4.

**Вещества, определяемые по ранее утвержденным
и опубликованным Методическим Указаниям**

Наименование вещества	Опубликованные Методические Указания
1	2
Обожженная керамика	МУ на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок. М., 1981, с.235 /переизданный сборник МУ вып. I-5/.
Абесцемент неокрашенный и цветной при содержании в них двуокиси марганца не более 5%, оксид хрома не более 7%, оксид железа не более 10%.	
Сополимер винилхлорида и акрилонитрила /СВН-80А/, ТУ 6-01-2-439-76.	
Сополимер винилхлорида, акрилонитрила, метакрилата /ВНМ-16/, ТУ 6-01-2-483-77.	- " -
Полимер метакрилата М-90.	- " -
Тетраборид кремния.	- " -
Полиалканид АН-III /1,2-додекамтиленпиррометил/.	- " -
Коллоидный раствор кремниевой кислоты и его смесь с плавленым кварцем /по сухому остатку/.	- " -
Смесь циркона с коллоидным раствором кремниевой кислоты /по сухому остатку/.	- " -
Цеолиты /природные и искусственные/.	- " -
Спек боксита и нефелина.	- " -
Спек низкремнистых бокситов.	- " -
Стеклокристаллический цемент.	МУ на фотометрическое определение свинца в воздухе, вып. 15. М., 1979, с.112.
Свинцово-оловянные припой /сурьмянистые и бессурьмянистые/ /по свинцу/.	

I	!	2
Свинцово-кадмиевый припой. Стеклоэмаль.	МУ на фотометрическое определение свинца в воздухе, вып. 15. М., 1979, с. 112.	
Сополимер бутилметакрилата и метакри- ловой кислоты /БМК-5/, ТУ 6-01-26-75	МУ на гравиметрическое определение пыли в воз- духе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок. М., 1981, с. 235 /перезданный оборник МУ № 1-5/.	
Сополимер винилхлорида и винилацетата /А-15-Л/, ТУ 6-01-77-93-73.		
Сополимер винилхлорида, винилацетата и малеиновой кислоты /А-15 Кр/, ТУ 24-79-1-71.		
Сополимер метакриловой кислоты и ме- тилметакрилата /М-14 ВВ/, ТУ 6-01-10-70-76.		- " -

Л-56590 от 24.06.86г. и Л-24,5 Зак. №542 Тир 1250
Типография Министерства здравоохранения СССР